


EyeC Audit Trail Viewer

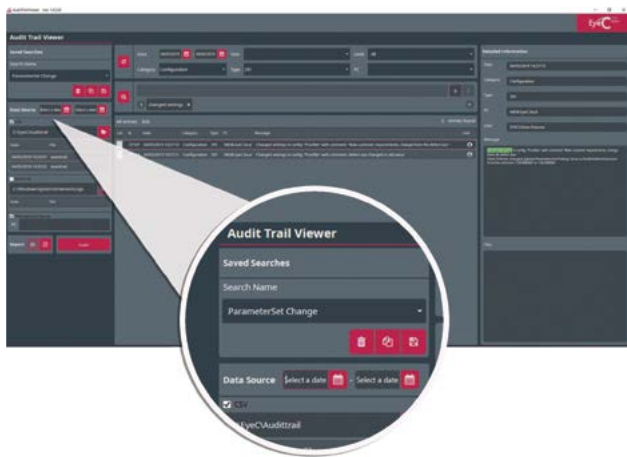

監査証跡レビューを簡単に実行

便利な監査

EyeC ProfilerおよびEyeC Profiler Graphicのバージョン3.4以降で利用可能なEyeC Audit Trail Viewerは、**監査証跡をレビューし、重要なイベントを簡単かつ確実に追跡する**のに役立ちます。それにより、**あらゆる異常をすばやく検出し**、工程管理の時間を大幅に節約し、監査の準備を整えます。

柔軟なデータ管理

EyeC Audit Trail Viewerを使用すると、csvファイル、イベントログ、外部ソースからのデータ（バックアップデータや複数のコンピュータからのデータなど）に関係なく、**すべての追跡データを柔軟に読み込んで視覚化**できます。

明確な視覚化

米国FDAのTitle 21 CFR Part 11で要求されているように、EyeC Audit Trail Viewerは**関連するすべての情報を人間が読める形式で表示**します。ウィンドウの中央にあるメインビューには、すべてのエントリの完全なリストが表示されます。ウィンドウの右側にある詳細ビューには、現在選択されているイベントの詳細情報が表示されます。

フィルタとクエリをカスタマイズ

EyeC Audit Trail Viewerを使用すると、**重要なイベントに焦点を当てるためにデータにフィルタ処理をかける**ことができます。ソフトウェアには、フィルタのセットが含まれており、とりわけ、日付、ユーザー、およびイベントの種類によってエントリを絞り込むことができます。さらに、特定のイベントを識別するために、検索語を組み合わせたたり、代替の検索語を使用できます。**検索クエリを保存、コピー、変更**することもできます。その結果、**一貫したレビューを実行し、時間を節約**できます。

総合的なレポート

EyeC Audit Trail Viewerを使用して、**レビュー結果からいつでもレポートを生成**できます。あなたの工程を文書化し、または監査人に証拠を提出するための完璧なツールです。

JP-19-0515 | *米国FDAタイトル21 CFR Part 11に記載されているガイドラインに従った検証に必要なすべての機能が含まれています。これらの技術仕様は機能的な規定に基づいています。記載されているすべての値は、このシートが作成された時点での知る限りのものであり、予告なしに変更されることがあります。